

Sutures chirurgicales atraumatiques et fils de suture individuels stériles



# Sintraumal + Surgi-Fil by roeko

# Surgi-Fil + Sintraumal ont une bonne compatibilité tissulaire à l'application:

- Le revêtement hydrophobe des fils de suture leur confère des propriétés non capillaires. Ceci prévient contre les inflammations, car le liquide tissulaire et l'eau ne pénètrent pas dans le fil.
- Grâce à leur revêtement, les fils de suture Sintraumal ont un effet coupant extrêmement faible et permettent ainsi des sutures chirurgicales à traumatisme minime.


# Surgi-Fil + Sintraumal sont sûrs et faciles à utiliser :


- présentés en emballage double sous blister stérile
- faciles à nouer, avec haute résistance du nœud
- pour une meilleure visibilité, les fils de polyester sont colorés en vert et les fils de soie en noir
- le fil ne se tord pas et est facile à prélever de son support

## **Sintraumal**

## Combinaison fil-aiguille atraumatique

Sintraumal est composé d'une aiguille sans chas affilée avec précision et d'un fil de suture en soie ou en polyester non résorbable. Les fils sont sertis sur des aiguilles en acier inoxydable. Ceci permet d'éviter le risque d'élargissement de la plaie provoqué par une aiguille avec chas et de minimiser le traumatisme tissulaire.

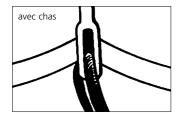

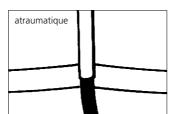



## Surgi-Fil

## Fil de suture chirurgicale sans aiguille

Les fils de soie Surgi-Fil sont constitués de fibre naturelle de soie spécialement tressée. L'imprégnation histocompatible donne aux fils des propriétés non capillaires. En raison de leur tressage spécial, les fils de soie sont utilisables dans tous tissus pour les sutures à points perdus, les ligatures, les ligatures périvasculaires et aussi pour les sutures en surface. Pour une meilleure visualisation, les fils sont colorés en noir par de l'hématine.





<u>Les fils de polyester Surgi-Fil</u> sont tressés. Leur revêtement hydrophobe procure une histocompatibilité supérieure à la moyenne et évite la capillarité.

En raison de leurs propriétés mécaniques excellentes, les fils en polyester Flexafil sont particulièrement appropriés aux ligatures, aux ligatures périvasculaires et à la suture des plaies. Pour les différencier des fils de soie, les fils de polyester sont colorés en vert

Indication	<b>Aiguille 1:1</b> Taille réelle		Forme de l'aiguille	<b>Grosseu</b> metric	<b>r</b> USP	Fil 45 cm	REF
Interventions sur le tissu palatin		_	HS 20	1.5	4/0	Soie noire	490 301
Extractions			HS 25	2.0	3/0	Soie noire	490 302
Résections de l'apex radiculaire, greffes		_	DS 20	1.5	4/0	Soie noire	490 303
Extractions		_	HS 25	2.5	2/0	Soie noire	490 305
Extractions, par ex. de dents de sagesse, extractions systématiques en série, sutures dans des tissus épais		_	HRT 18	2.0	3/0	Flexafil vert	490 306
Greffes, chirurgie parodontale Gingivectomie			GR 20	1.5	4/0	Soie noire	490 307
Extractions, par ex. de dents de sagesse, greffes			AS 30	2.0	3/0	Soie noire	490 308

Contenu: 12 pièces par emballage

Il existe 7 combinaisons fil-aiguille Sintraumal différentes: La gamme Sintraumal comprend des aiguilles rondes, des aiguilles tranchantes et des aiguilles rondes tranchantes (coupe trocart). Elles sont disponibles en forme demi-cercle, 3/8 de cercle, droite ou hameçon.



•

aiguille ronde

aiguille tranchante

aiguille ronde, tranchante (coupe trocart) H – demi-cercle

D - 3/8 de cercle

G – droite

A – hameçon

R – ronde

RT – ronde,

tranchante (coupe trocart)

S – tranchante

# roeкo optimise les interventions chirurgicales

# **Surgitip-micro** Canule d'aspiration Gelatamp micro-chirurgicale stérile

Steri-Quick Tissu de protection stérile



Gelatamp

Tampons de gélatine à l'argent colloïdal



Roeko-Swab Compresses de gaze stériles

## **Commande**

Sintraumal						Surgi-Fil						
Combinaison fil-aiguille					Fil de suture chirurgicale							
metri	ic USP	,	Cont.	REF	Quantité	metric	USP	-	Cont.	REF	Quantité	
HS 20 1.5	4/0	Soie noire	12 St.	490 301		4.0	1	Soie noire	12 St.	490 409		
HS 25 2.0	3/0	Soie noire	12 St.	490 302		3.5	0	Soie noire	12 St.	490 410		
DS 20 1.5	4/0	Soie noire	12 St.	490 303		2.5	2/0	Soie noire	12 St.	490 411		
HS 25 2.5	2/0	Soie noire	12 St.	490 305		2.0	3/0	Soie noire	12 St.	490 412		
HRT18 2.0	3/0	Flexafil vert	12 St.	490 306		1.5	4/0	Soie noire	12 St.	490 413		
GR 20 1.5	4/0	Soie noire	12 St.	490 307		2.0	3/0	Flexafil vert	12 St.	490 421		
AS 30 2.0	3/0	Soie noire	12 St.	490 308		1.5	4/0	Flexafil vert	12 St.	490 422		

Longueur du fil 45 cm

Longueur du fil 70 cm

### www.coltenewhaledent.com © 2004 Coltène/Whaledent

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG Raiffeisenstraße 30 89129 Langenau/Germany Tel. +49 (0)7345 805 0 Fax +49 (0)7345 805 201 productinfo@coltenewhaledent.de

## Coltène/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA Tel. +1 330 916 8800 Fax +1 330 916 7077 productinfo@coltenewhaledent.com

## Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstraße 20 9450 Altstätten/Switzerland Tel. +41 (0)71 757 53 00 Fax +41 (0)71 757 53 01 office@coltenewhaledent.ch

